



子ども専用仕様の設計 ローテーション - イン - スペース テクノロジー！

ローテーション - イン - スペース 車いす
ジッピーアイリス は、
ポジショニング、 操作性、そして
XLOCK® 折りたたみクロスブレース
オプションによる **持ち運びやすさ** の
優れた組み合わせを提供します。



アイリス ファミリー

インテリジェント ローテーション - イン - スペース

小児に特化した設計

特許を取得している インテリジェント ローテーション - イン - スペース技術により、アイリスのシートフレームはお子様の重心を中心に回転します。回転アームは小児用に特別に設計されており、スムーズなティルト動作を保証します。また、ティルトしている間も子どもが快適で安全な状態を保つことができ、保護者や介助者にとっても操作しやすくなっています。

Zippieアイリスには
折りたたみ式と
固定式フレームの
2種類があります！

WC-19認可 車載時固定用フック

安全なバス移動のために

バスや自動車での安全な移動のために、SAE (J2249)*に従って認可された車いす固定装置および乗員拘束装置と併用することで、アイリスは自動車の乗員用シートとして使用することができます。

*車いすユーザが一安全かつ容易に
車両に乗り降りできるようにするためのガイドライン

オプション

Xロック 折りたたみ式 クロスブレース

移動時に大活躍！

Zippieアイリスの持ち運びや保管が、これまで以上に便利になりました。特許を取得した XLOCK® 折りたたみ式クロス ブレースは、展開時に完全にロックされるため、剛性に優れ コンパクトに折りたためます。持ち運びにとても便利です。



Xロック
折りたたみ式クロスブレース



拡張だって
か～んたん！

適応性と
互換性の高い
構成部品

内蔵型 拡張機能

Xロックフレームの内蔵型拡張機能では、奥行は最大4インチまで、幅は2インチ広げられます。またはオプションで幅調整可能な支柱チューブもございます。アイリスはお子さまの成長と共に拡張できます。アームレストやフットレストを含む調節可能な部品も、成長過程の適切なポジショニングを維持するのに役立ちます。

子どもたちは...

動き
変化し
成長する！

どんな時でも
ZIPPIEアイリスは
準備OK！

頭の先からつま先まで 全身くまなく
優れたポジショニング

40° と 55° の回転範囲

アイリスには40°または55°の回転範囲があり、小児用ティルト-イン-スペース車いすの中で最大の傾斜範囲を提供します。後方ティルトは、小児の体位を改善し、食事がしやすくなり、呼吸機能を促進し、圧を軽減し、視線を改善します。



モノ バックサポート システム オプション

中央の1本の支柱により、背もたれと車いすの幅を別々に選ぶことができます。取付金具の干渉がなくなるので、胸部ラテラルサポートを無段階に調整できます。また、背もたれの正中線オフセットが2インチあり、オプションでダイナミック機能も利用できます。

ダイナミック バック オプション

ダイナミックバックは、子どもと一緒に動きます。適切なポジショニングを維持し、不随意運動による車いすの損傷を軽減します。

Z-フィニティ システム 下肢ポジショニング

子どもの成長やニーズの変化に合わせて、Z-finitシステムはシートパン上0.5インチからシートパン下21インチまでの間で調節でき、常に脚も足裏も適切にサポートします。回転式の金具により、フットレストの角度と位置を無段階で調整でき、足、足首、膝の最適なポジショニングを実現します。




介助者に
便利な
オプション



- LTVまたはトリロジー人工呼吸器へのアクセスが容易な縦置き型 呼吸器トレイ
- ケーブルが露出することなくティルト操作が可能な フット・リリース（写真左）
- コンパクトでアクセスしやすく、操作も簡単な ブッシュボタン式 ハブロック
- 様々な身長の介助者に適合しティルトした状態でも車いすを押せる 260°の角度調節が可能な ストローラーハンドル（写真左）
- 部品にゴミが溜まるのを防ぐ ロッカーアームカバー

重要事項：印刷工程では、塗装の仕上がりを正確に表現することはできません。実際の色とは異なります。

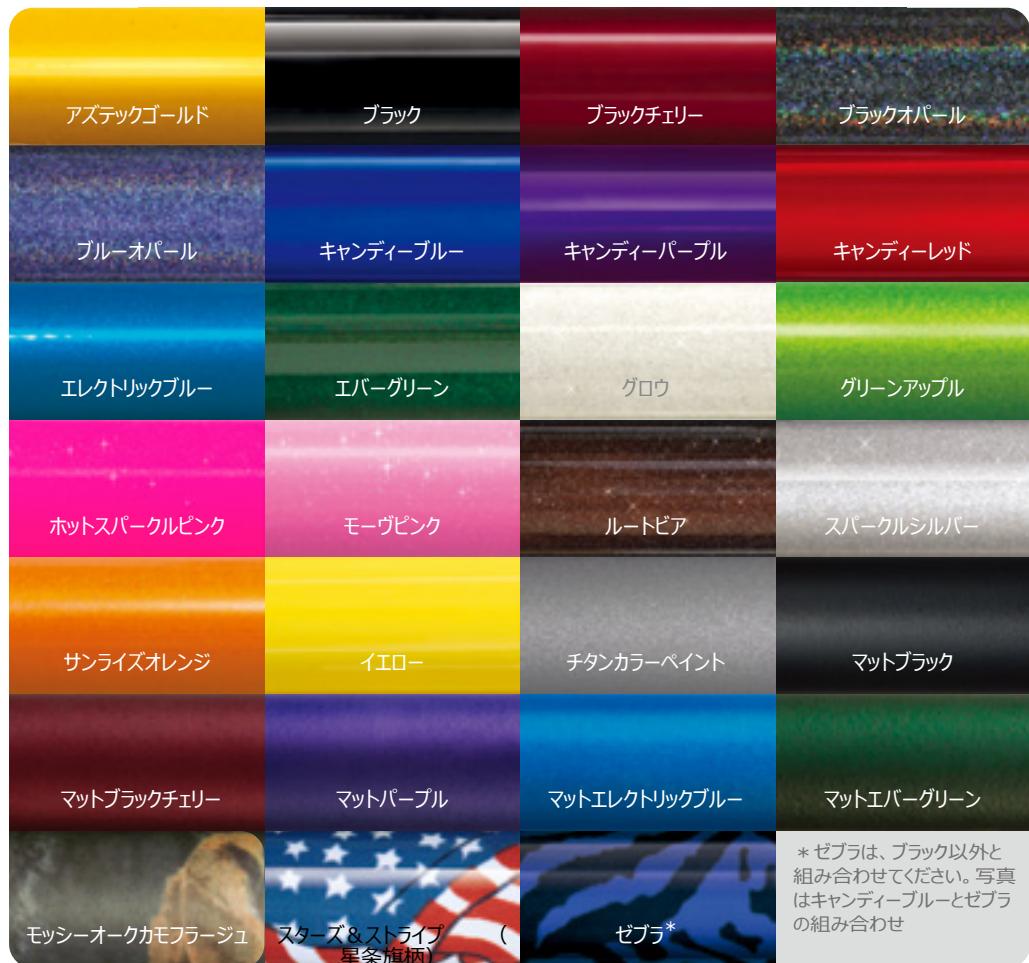

カラーオプション

ZIPPIE アイリスは、他のどの小児用ティルト-イン-スペース車いすよりも、多くのカラーオプションがございます！

27色のフレームカラーからお選びいただけます。

カスタマイズ

built4me

弊社の特注部門(Built-4-Me)は、オーダーフォームに記載してある以上のカスタマイズを実現するため、日々努力をしています。

カスタマイズ技術 & 製造のエキスパートたちが、お客様の具体的なご要望に耳を傾け、指紋のような世界に1台しかない車いすをお作りいたします。



車載時固定用

フックオプション：あり*

ティルト：

40° : -5 ~ 35°, 0 ~ 40°, +5 ~ 45°

55° : -5 ~ 50°, 0 ~ 55°, +5 ~ 60°

車いす重量：

固定式 : 14.51 kg

折りたたみ式 : 16.23 kg

輸送時の重量：

(フットレスト&後輪なし)

固定式 : 10.34 kg

折りたたみ式 : 12.06 kg

耐荷重：

102.05 kg ♪ (シーティングなし)

全幅 : 17.5" ~ 25.5" (44.45cm ~ 64.77 cm)

シート幅 :

固定式 : 10" ~ 18" (25.4cm ~ 45.72 cm)

折りたたみ式 : 10" ~ 16" (25.4cm ~ 40.64 cm)
(18"まで拡張)

シート奥行き : 10" ~ 18" (25.4cm ~ 45.72 cm)

前座高 : 13" ~ 19" (33.02cm ~ 48.26 cm)

ドロップシート使用 :

11" ~ 17.5" (27.94cm ~ 44.45 cm)

後座高 : 13" ~ 19" (33.02cm ~ 48.26 cm)

ドロップシート使用 :

11" ~ 17.5" (27.94cm ~ 44.45 cm)

*ANSI/RESNA WC-19規格に準拠。詳細はQuickie® & Zippie® WC-19 Transit Securement Supplement (MK-100072)を参照してください。補足資料は以下からダウンロード可能 www.sunrisemedical.com.

♪ 警告！この車いすに、Z-フニティシステムフットレストを追加すると、耐荷重が75kgに制限されます。

お問合せは

ABILITIES アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>



(無料通話) やさしいようぐを
0120-834490
—お近くの営業所につながります—



フットレスト/フレーム角度 :

スイингイン/アウト :

60°、70°、80°、90°、

エレベーティング、拘縮用、

高機能エレベーティング、高耐久性、

Z-フニティ (フットレストの角度を幅広く調整)

背角度調整 :

前方 (-) 5° ~ 後方 (+) 30°

背もたれタイプ :

高さ固定式、

高さ調節可、

リクライニング、

ダイナミック、

MONO バックレストシステム

バックサポート高 :

高さ固定式 :

19"、22"、25"

高さ調整式 :

16 ~ 22"、19 ~ 25"

リクライニング: 21"、24"

MONO バックレストシステム : 18.7"、21.7"

重心位置 (COG) 調整 : 6"

リアホイールサイズ :

12"、16"、20"、22"、24"

キャスターサイズ :

4"、5"、6"、8"

保証 : 限定保証/初めの所有者の一部生涯保証
(取扱説明書参照)